

# PULPDENT® DENTIN DESENSITIZER

Contains Glutaraldehyde, Fluoride and Water

## EN

### PULPDENT®

#### Dentin Desensitizer

##### Contains Glutaraldehyde, Fluoride and Water

Pulpdent Dentin Desensitizer contains 5% glutaraldehyde in water. It is not a dentin primer; however, it can be used in conjunction with adhesives and composites, as well as with provisional and permanent traditional dental cements. It does not interfere with bonding techniques and does not affect bond strengths of adhesives, composites and resin cements. Fluoride is added to the Desensitizer to enhance the stability of the solution. Pulpdent makes no claim as to the therapeutic benefits of the fluoride or the antimicrobial effect of glutaraldehyde.

#### PRODUCT DESCRIPTION

Pulpdent Dentin Desensitizer is a solution of 5% glutaraldehyde in water with fluoride for treatment of exposed dentin surfaces.

#### INDICATIONS

For use on dentin surfaces, including cavity, crown and inlay preparations and cervical areas, as a desensitizing agent.

#### CONTRAINDICATIONS

Not for direct placement on the pulp. Avoid contact with eyes, skin, and mucous membranes.

#### INSTRUCTIONS FOR USE

##### For Bonded Restorations

1. Prepare tooth to receive a restoration.
2. Etch and rinse well.
3. Remove excess water, but do not dry dentin.
4. Shake bottle well, and dispense a small amount into a mixing well.
5. Using a cotton pellet, apply Desensitizer to dentin for 20-30 seconds.
6. Blot or apply short blast of air to remove excess, but do not dry.
7. Apply adhesive primer and proceed with bonding technique using your preferred materials.

##### Traditional Restorations

1. Prepare tooth to receive a restoration.
2. Do not etch dentin.
3. Shake bottle well and dispense a small amount into a mixing well.
4. Using a cotton pellet, apply 2 coats of Dentin Desensitizer to dentin, drying surface after each coat.
5. Proceed with restoration.

##### Cervical Sensitivity

1. Clean area with a slurry of pumice, if necessary.
2. Gently blot the sensitive area with a cotton pellet to remove excess water.
3. Protect gingiva with suitable gingival protection material.
4. Shake bottle well and dispense a small amount into a mixing well.

## FR

### PULPDENT®

#### Dentin Desensitizer

Contient du glutaraldéhyde, du fluorure et de l'eau  
Pulpdent Dentin Desensitizer contient 5% de glutaraldéhyde dans l'eau. Ce n'est pas un primaire dentinaire ; cependant, il peut être utilisé avec des adhésifs et des composites, ainsi qu'avec des ciments dentaires traditionnels provisoires et permanents. Il n'interfère pas avec les techniques de collage et n'affecte pas les forces d'adhésion des adhésifs, des composites et des résines ciments. Du fluorure est ajouté au désensibilisateur afin d'améliorer la stabilité de la solution. Pulpdent ne prétend pas aux bienfaits thérapeutiques du fluorure ou à l'effet antimicrobien du glutaraldéhyde.

#### Description du Produit

Pulpdent Dentin Desensitizer est une solution composée de 5 % de glutaraldéhyde dans de l'eau avec du fluorure pour le traitement des surfaces dentinaires exposées.

#### Indications

À utiliser sur les surfaces dentinaires, y compris les cavités, les couronnes et les préparations d'inlays ainsi que les zones cervicales, en tant qu'agent désensibilisant.

#### Contre-indications

Non indiqué pour un placement direct sur la pulpe. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les muqueuses.

#### Instructions d'Utilisation

##### Restaurations avec adhésif

1. Préparer la dent à restaurer.

5. Using a cotton pellet, carefully apply Dentin Desensitizer to the cervical area of the tooth, rubbing it for 20-30 seconds, and gently air dry. Repeat this step 2 or 3 more times.

6. The effect of Pulpdent Dentin Desensitizer can be tested any time during this procedure by applying a short blast of air to the treated area.

**NOTE:** It is not necessary to etch the cervical area unless a bonded restoration will be placed, in which case the last coat of Dentin Desensitizer should not be dried.

#### Vital Bleaching

When sensitive teeth compromise the patient's desire to wear a bleaching tray, apply 3-4 coats of Pulpdent Dentin Desensitizer to the cervical area. Take care to protect the gingiva with a suitable gingival protection material prior to application of the Desensitizer.

#### WARNING

Glutaraldehyde is a powerful chemical and can be dangerous. Wear protective gloves and eyewear. Wash hands after use. Do not swallow. Keep away from children. Glutaraldehyde is harmful to the eyes and can cause blindness. Avoid contact with eyes, pulp, skin, and mucous membranes. If glutaraldehyde contacts eyes, pulp, skin or mucous membranes, rinse immediately with copious amounts of water. Wash skin with soap and water. If glutaraldehyde contacts eyes, rinse immediately with copious amounts of water and immediately seek medical attention.

**Note:** Apply disposable barrier sleeves/wraps over multiple-use dental dispensers before use with each patient. For additional information, refer to: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

#### STORE

Store tightly closed in original container at temperatures not exceeding 22°C/72°F. Refrigeration may increase stability, but is not necessary. Do not freeze. Return to room temperature before use. Shake for 10 seconds before use.

#### REPORTING OF SERIOUS INCIDENTS

Any serious incidents involving the device should be reported to the manufacturer and the Competent Authority of the Member State in which the incident occurred, or other appropriate regulatory body. Reports of serious incidents should be sent to:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

email: [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)

**Note:** Refer to the Safety Data Sheet for a list of materials present in this product.

2. Mordancer et rincer soigneusement.
3. Retirer l'excès d'eau, mais ne pas sécher la dentine.
4. Bien agiter le flacon et verser une petite quantité dans un godet à mélange.
5. À l'aide d'une boulette de coton, appliquer le désensibilisateur sur la dentine pendant 20 à 30 secondes.
6. Tamponner ou appliquer un petit jet d'air pour éliminer l'excès, mais ne pas sécher.
7. Appliquer l'apprêt adhésif et procéder à la technique de collage en utilisant vos matériaux préférés.

#### Restaurations traditionnelles

1. Préparer la dent à restaurer.
2. Ne pas mordancer la dentine.
3. Bien agiter le flacon et verser une petite quantité dans un godet à mélange.
4. À l'aide d'une boulette de coton, appliquer 2 couches de Dentin Desensitizer sur la dentine, en séchant la surface après chaque couche.
5. Procéder à la restauration.

#### Sensibilité cervicale

1. Nettoyer la zone avec un mélange abrasif, si nécessaire.
2. Tamponner délicatement la zone sensible avec une boulette de coton pour éliminer l'excès d'eau.
3. Protéger la gencive avec un matériau de protection gingival approprié.
4. Bien agiter le flacon et verser une petite quantité dans un godet à mélange.
5. À l'aide d'une boulette de coton, appliquer soigneusement le Dentin Desensitizer sur la zone cervicale de la dent, en la frottant pendant 20 à 30 secondes, et sécher légèrement à l'air. Répéter cette étape 2 ou 3 fois de plus.
6. L'effet de Pulpdent Dentin Desensitizer peut être testé à tout moment au cours

de cette procédure en appliquant un court jet d'air sur la zone traitée.

**REMARQUE :** Il n'est pas nécessaire de mordancer la zone cervicale à moins qu'une restauration avec adhésif ne soit placée, auquel cas la dernière couche de Dentin Desensitizer ne doit pas être séchée.

#### Blanchiment vital

Lorsque les dents sensibles compromettent le désir du patient de porter une gouttière de blanchiment, appliquer 3 à 4 couches de Pulpdent Dentin Desensitizer sur la zone cervicale. Veiller à protéger la gencive avec un matériau de protection gingivale approprié avant l'application du désensibilisateur.

#### Mise en garde

Le glutaraldéhyde est un produit chimique puissant et peut être dangereux. Porter des gants et des lunettes de sécurité. Se laver les mains après utilisation. Ne pas avaler. Garder hors de la portée des enfants. Le glutaraldéhyde est nocif pour les yeux et peut causer la cécité. Éviter le contact avec les yeux, la pulpe, la peau et les muqueuses. Si le glutaraldéhyde entre en contact avec les yeux, la pulpe, la peau ou les muqueuses, rincer immédiatement à grande eau. Laver la peau avec du savon et de l'eau. Si le glutaraldéhyde entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau et consulter immédiatement un médecin.

**Remarque :** Appliquer des protections jetables et remplacer l'embout avant de

l'utiliser avec chaque patient. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

#### Stockage et Manipulation

Conservé hermétiquement clos dans le contenant original à des températures ne dépassant pas 22°C/72°F. La réfrigération peut augmenter la stabilité, mais n'est pas nécessaire. Ne pas congeler. Ramener à température ambiante avant l'utilisation. Agiter pendant 10 secondes avant l'utilisation.

#### Notification des incidents graves

Tout incident grave impliquant le dispositif doit être notifié au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident s'est produit, ou à tout autre organisme de réglementation approprié.

Les rapports d'incidents graves doivent être envoyés à :

Société Pulpdent

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 États-Unis

Tél. : 617-926-6666 / Fax : 617-926-6262

Courriel : [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)

**Remarque :** Veuillez-vous reporter à la fiche de données de sécurité pour une liste des matériaux présents dans ce produit.

## ES

### Dentin Desensitizer

Contiene glutaraldehído, fluoruro y agua

#### Descripción del producto

Pulpdent Dentin Desensitizer es una solución de glutaraldehído al 5% en agua con flúor para el tratamiento de superficies de dentina expuestas.

#### Indicaciones

Para uso en superficies de dentina, incluyendo cavidades, preparaciones de corona e incrustaciones y áreas cervicales, como agente desensibilizante.

#### Contraindicaciones

No está indicado para la colocación directa en la pulpa. Evite el contacto con ojos, piel y membranas mucosas.

#### Instrucciones de uso

##### Para restauraciones adhesivas

1. Preparar el diente para recibir la restauración.
2. Grabe y enjuague bien.
3. Retire el exceso de agua, pero no seque la dentina.
4. Agite bien la botella y dispense una pequeña cantidad en un pad de mezcla.
5. Usando una torunda de algodón, aplique el Desensibilizante a la dentina durante 20-30 segundos.
6. Seque o aplique una ráfaga corta de aire para eliminar el exceso, pero no se seque.
7. Aplique primer adhesivo y proceda con la técnica de unión utilizando sus materiales preferidos.

##### Restauraciones tradicionales

1. Preparar el diente para recibir una restauración.
2. No grabar dentina.
3. Agite bien la botella y dispense una pequeña cantidad en un pad de mezcla.
4. Usando una torunda de algodón, aplique 2 capas del Desensibilizante a la dentina, secando la superficie después de cada capa.
5. Proceder con la restauración.

#### Sensibilidad cervical

1. Limpie el área con una suspensión de pómez, si es necesario.
2. Seque suavemente el área sensible con una torunda de algodón para eliminar el exceso de agua.
3. Proteja la encía con material de protección gingival adecuado.
4. Agite bien la botella y dispense una pequeña cantidad en un pad de mezcla.
5. Usando una torunda de algodón, aplique cuidadosamente Dentin Desensitizer en el área cervical del diente, frotándolo durante 20-30 segundos y secando suavemente al aire. Repita este paso 2 o 3 veces más.
6. El efecto de Pulpdent Dentin Desensitizer se puede probar en cualquier

momento durante este procedimiento aplicando una breve ráfaga de aire en el área tratada.

**NOTA:** No es necesario grabar el área cervical a menos que se coloque una restauración adhesiva, en cuyo caso no se debe secar la última capa de Desensibilizador de Dentina.

#### Blanqueamiento vital

Cuando los dientes sensibles comprometen el deseo del paciente de usar férulas para blanqueamiento, aplique 3-4 capas de Pulpdent Dentin Desensitizer en el área cervical. Tenga cuidado de proteger la encía con un material de protección gingival adecuado antes de la aplicación del desensibilizador.

#### Precaución

El glutaraldehído es un químico poderoso y puede ser peligroso. Use guantes protectores y gafas. Lávese las manos después de su uso. No trague. Manténgase alejado de los niños. El glutaraldehído es dañino para los ojos y puede causar ceguera. Evite el contacto con los ojos, la pulpa, la piel y las membranas mucosas. Si el glutaraldehído entra en contacto con los ojos, la pulpa, la piel o las membranas mucosas, enjuague inmediatamente con grandes cantidades de agua. Lavar la piel con agua y jabón. Si el glutaraldehído entra en contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con cantidades copiosas de agua y busque atención médica de inmediato.

**Nota :** Utilice fundas/envolturas de barrera desechables sobre los dispensadores dentales de uso múltiple antes de usarlos con cada paciente. Para obtener información adicional, consulte: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>.

#### Almacenamiento y Manipulación

Almacene bien cerrado en el contenedor original a temperaturas que no excedan 22°C/72°F. La refrigeración puede aumentar la estabilidad, pero no es necesaria. No congelar. Regrese a temperatura ambiente antes de usar. Agite durante 10 segundos antes de usar.

#### Reporte de incidentos graves

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que ocurrió el incidente, u otro organismo regulador apropiado. Los informes de incidentes graves deben enviarse a:

Corporación Pulpdent

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 EE. UU.

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

correo electrónico: [helpdesk@pulpdent.com](mailto:helpdesk@pulpdent.com)

**Nota:** Consulte la hoja de datos de seguridad para obtener una lista de los materiales presentes en este producto.

## DE

### PULPDENT®

#### Dentin Desensitizer

Enthält Glutaraldehyd, Fluorid und Wasser

#### Produktbeschreibung

Pulpdent Dentin Desensitizer ist eine Lösung von 5% Glutaraldehyd in Wasser mit Fluorid zur Behandlung von freiliegenden Dentinoberflächen.

#### Indikationen

Zur Verwendung auf Dentinoberflächen, einschließlich Kavitäten-, Kronen- und Inlaypräparationen und Zahnhalsbereichen, als Desensibilisierungsmittel.

#### Kontraindikationen

Nicht indiziert zum direkten Einsatz in der Pulpa. Kontakt mit Augen, Haut und Schleimhäuten vermeiden.

## Gebrauchsanweisung

### Für Verbund- Restaurationen

1. Bereiten Sie den Zahn für die Aufnahme einer Restauration vor.
2. Ätzen und gut ausspülen.
3. Überschüssiges Wasser entfernen, aber das Dentin nicht trocknen.
4. Flasche gut schütteln und eine kleine Menge in ein Mischgefäß geben.
5. Tragen Sie den Desensitizer mit einem Wattepellet 20-30 Sekunden lang auf das Dentin auf.
6. Tupfen Sie den Überschuss ab oder blasen Sie ihn kurz ab, aber lassen Sie ihn nicht trocknen.
7. Adhäsiv-Primer auftragen und mit der Bonding-Technik unter Verwendung der von Ihnen bevorzugten Materialien fortfahren.

## Tradizionale Restaurazioni

1. Preparare Sie den Zahn für die Aufnahme einer Restauration.
2. Ätzen Sie das Dentin nach an.
3. Flasche gut schütteln und eine kleine Menge in ein Mischgefäß geben.
4. Mit einem Wattepellet 2 Schichten Dentin-Desensibilisierer auf das Dentin auftragen und die Oberfläche nach jeder Schicht trocknen.
5. Mit der Restauration fortfahren.

## Zervikale Empfindlichkeit

1. Reinigen Sie den Bereich bei Bedarf mit einer Bimssteinaufschlammung.
2. Tupfen Sie die empfindliche Stelle vorsichtig mit einem Wattebausch ab, um überschüssiges Wasser zu entfernen.
3. Schützen Sie die Gingiva mit einem geeigneten Zahnfleischschutzmaterial.
4. Flasche gut schütteln und eine kleine Menge in eine Mischschale geben.
5. Mit einem Wattepellet den Dentin-Desensitizer vorsichtig auf den Zahnhalsbereich auftragen, 20-30 Sekunden lang einreiben und vorsichtig an der Luft trocknen lassen. Wiederholen Sie diesen Schritt noch 2 oder 3 Mal.
6. Die Wirkung von Pulpdent Dentin Desensitizer kann während dieses Verfahrens jederzeit durch einen kurzen Luftstoß auf den behandelten Bereich getestet werden.

**HINWEIS:** Es ist nicht notwendig, den zervikalen Bereich zu ätzen, es sei denn, es wird eine Verbund-Restauration eingesetzt; in diesem Fall sollte die letzte Schicht Dentin Desensitizer nicht getrocknet werden.

## Vitales Bleaching

Wenn empfindliche Zähne den Patienten daran hindern, eine Bleichschiene zu tragen, tragen Sie 3-4 Schichten Pulpdent Dentin Desensitizer auf den zervikalen Bereich auf. Achten Sie darauf, die Gingiva vor dem Auftragen des Desensitizers mit einem geeigneten Zahnfleischschutzmaterial zu schützen.

## Warnhinweis

Glutaraldehyd ist eine starke Chemikalie und kann gefährlich sein. Tragen Sie

Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Waschen Sie sich nach der Anwendung die Hände. Nicht verschlucken. Von Kindern fernhalten. Glutaraldehyd ist schädlich für die Augen und kann zur Erblindung führen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Fruchtfleisch, Haut und Schleimhäuten. Bei Berührung mit den Augen, der Pulpa, der Haut oder den Schleimhäuten sofort mit reichlich Wasser ausspülen. Die Haut mit Wasser und Seife waschen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.

**Bemerkung:** Verwenden Sie vor jedem Gebrauch Einweg-Schutzkappen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

## Lagerung und Handhabung

Gut verschlossen in der Original-Verpackung und bei Temperaturen nicht über 22°C/72°F lagern. Kühlung kann die Stabilität erhöhen, ist aber nicht notwendig. Nicht einfrieren. Vor Gebrauch wieder auf Raumtemperatur bringen. Vor Gebrauch 10 Sekunden lang schütteln.

## Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen

Alle schwerwiegenden Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Produkt sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Vorkommnis aufgetreten ist, oder einer anderen zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet werden.

Richten Sie bitte Meldungen von schwerwiegenden Vorkommnissen an:

Pulpdent Corporation  
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA  
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

E-Mail: [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)

**Hinweis:** Eine Liste der in diesem Produkt enthaltenen Materialien finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

## IT

### PULPDENT®

#### Dentin Desensitizer

Contiene Glutaraldehyde, Fluoro e Acqua

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pulpdent Dentin Desensitizer è una soluzione di glutaraldeide al 5% in acqua con fluoro per il trattamento delle superfici dentinali esposte.

#### INDICAZIONI

Per l'utilizzo come agente desensibilizzante su superfici dentinali, comprese preparazioni di cavità, corone e intarsi e aree cervicali.

#### CONTROINDICAZIONI

Non indicato per il posizionamento diretto sulla polpa. Evitare il contatto con occhi, pelle e mucose.

#### ISTRUZIONI PER L'USO

##### Per Restauri Adesivi

1. Preparare il dente per ricevere un restauro.
2. Mordenzare e risciacquare bene.
3. Rimuovere l'acqua in eccesso, ma non essiccare la dentina.
4. Agitare bene il flacone e versare una piccola quantità in un pozzetto di miscelazione.
5. Utilizzando un pellet di cotone, applicare Dentin Desensitizer sulla dentina per 20-30 secondi.
6. Asciugare o soffiare con un breve getto d'aria per rimuovere gli eccessi, ma non essiccare.
7. Applicare il primer adesivo e procedere con la tecnica adesiva utilizzando i materiali preferiti.

##### Restauri Tradizionali

1. Preparare il dente per ricevere un restauro.
2. Non mordenzare la dentina.
3. Agitare bene il flacone e versare una piccola quantità in un pozzetto di miscelazione.
4. Utilizzando un pellet di cotone, applicare 2 strati di Dentin Desensitizer sulla dentina, asciugando la superficie dopo ogni applicazione.
5. Procedere con il restauro.

##### Sensibilità Cervicale

1. Pulire l'area con un impasto liquido di pomice, se necessario.
2. Asciugare delicatamente l'area sensibile con un pellet di cotone per rimuovere l'acqua in eccesso.
3. Proteggere la gengiva con un materiale da protezione gengivale adatto.
4. Agitare bene il flacone e versare una piccola quantità in un pozzetto di miscelazione.
5. Utilizzando un pellet di cotone, applicare con attenzione Dentin Desensitizer sull'area cervicale del dente, strofinare per 20-30 secondi e asciugare delicatamente con aria. Ripetere questo passaggio altre 2 o 3 volte.

6. L'effetto di Pulpdent Dentin Desensitizer può essere testato in qualsiasi momento durante questa procedura applicando un breve getto d'aria sull'area trattata.

**NOTA:** non è necessario mordenzare l'area cervicale a meno che non venga posizionato un restauro adesivo; in questo caso, l'ultimo strato di Dentin Desensitizer non deve essere asciugato.

#### Sbiancamento Vitale

Quando i denti sensibili compromettono il desiderio del paziente di indossare una mascherina per lo sbiancamento, applicare 3-4 strati di Pulpdent Dentin Desensitizer sulla zona cervicale. Fare attenzione a proteggere la gengiva con un materiale di protezione gengivale adatto prima dell'applicazione del desensibilizzante.

#### ATTENZIONE

La glutaraldeide è una sostanza chimica potente e può essere pericolosa. Indossare guanti e occhiali protettivi. Lavarsi le mani dopo l'uso. Non ingerire. Tenere lontano dai bambini. La glutaraldeide è dannosa per gli occhi e può causare cecità. Evitare il contatto con occhi, polpa, pelle e mucose. Se la glutaraldeide entra in contatto con occhi, polpa, pelle o mucose, sciacquare immediatamente con abbondante acqua. Lavare la pelle con acqua e sapone. Se la glutaraldeide entra in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico.

**Nota:** Applicare delle protezioni monouso sulla siringa e cambiare il puntale dopo ogni paziente.

Per ulteriori informazioni vedere <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

#### CONSERVAZIONE

Conservare ben chiuso nel contenitore originale a temperature non superiori a 22°C/72°F. La refrigerazione può aumentare la stabilità, ma non è necessaria. Conservare il prodotto in frigorifero. Non congelare. Riportare a temperatura ambiente prima dell'uso. Agitare per 10 secondi prima dell'uso.

#### SEGNALAZIONE DI INCIDENTI GRAVI

Qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente, o altro organismo di regolamentazione appropriato. Le segnalazioni di incidenti gravi devono essere inviate a:

Pulpdent Corporation  
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA  
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

e-mail: [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)

**Nota:** Consultare la scheda di sicurezza per un elenco dei materiali presenti in questo prodotto.



**Leibetseder Dentalwarenhandel GmbH**  
Hans-Zach-Straße 2  
4210 Gallneukirchen  
Austria

**Bohumila Siegllová**  
Kolmá 303  
25203 Ritka  
Czech Republic

**Hu-Fa Dental a.s.**  
Moravni 909  
765 02 Otrokovice  
Czech Republic

**Cenger Scandinavia A/S**  
Urlevvej 6 B  
8783 Hornslyd  
Denmark

**Dansk Nordenta A/S**  
Nydamsvvej 8  
8362 Hørning  
Denmark

**Plandent Oy**  
Asentajankatu 6 B  
00880 Helsinki  
Finland

**Opsyse**  
18 Allée du Fenouil  
ZA Saint Louis  
84250 Le Thor  
France

**Kinderdent GmbH**  
Gutenbergstraße 7  
28844 Weyhe  
Germany

**Ortho Organizers GmbH**  
Lauenbühlstraße 59  
88161 Lindenberg Im Allgäu  
Germany

**Dental Medical Ireland**  
Kellystown House  
Kellystown Lane, Leixlip  
Co. Kildare, W23 VF9P  
Ireland

**Ravelli S.p.A.**  
Via Darwin 32-34  
20019 Settimo Milanese  
Italy

**Viridental, UAB**  
Artojų G. 52B, Garliavos  
Apylinkių Seniūnija  
Teleičių Kaimas  
53273, Kauno Rajonas  
Lithuania

**Hofmeester Dental B.V.**  
Andries Copierhof 2  
3059 LM Rotterdam  
Netherlands

**Equadent Sp z o.o.**  
Ul. Pck 12  
62-500 Konin  
Poland

**Lifco Dental AB**  
Verkmästaregatan 1  
745 39 Enköping  
Sweden

**UNIDENT AB**  
Västerhavsvägen 2  
311 77 Falkenberg  
Sweden



[www.pulpdent.com/info](http://www.pulpdent.com/info)


	Electronic Safety Data Sheet
EN	Electronic Safety Data Sheet
ES	Ficha electrónica de datos de seguridad
FR	Fiche de données de sécurité électronique
DE	Elektronisches Sicherheitsdatenblatt
IT	Scheda di sicurezza elettronica
DK	Elektronisk sikkerhedsdatablad
NL	Elektronisch veiligheidsinformatieblad
SE	Elektroniskt säkerhetsdatablad
NO	Datablad om elektronisk sikkerhet
FI	Sähköinen käyttöturvallisuustiedote
CZ	Elektronický bezpečnostní list
LV	Elektroniskā drošības datu lapa
LT	Elektroninis saugos duomenų lapas
PT	Ficha de dados de segurança eletrónica
SK	Elektronická karta bezpečnostných údajov
PL	Elektroniczna karta charakterystyki
RO	Fișa electronică cu date de securitate
EE	Elektroniline ohutuskaart
BG	Електронен информационен лист за безопасност
GR	Ηλεκτρονικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας



**PULPDENT® Corporation**

80 Oakland Street • Watertown, MA 02472 • U.S.A.  
(617) 926-6666 or (800) 343-4342 • Fax (617) 926-6262  
[www.pulpdent.com](http://www.pulpdent.com) • [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)

Rx only

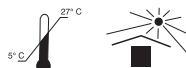

XP-DES-IN-12w  
REV:10/2024