


## PREP-RITE™ RC

Viscous EDTA Gel, 15%  
Canal Lubricant and Chelating Agent

 4 x 5 gm Prep-Rite RC

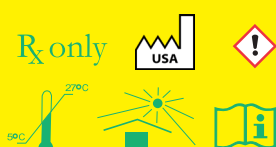

XP-PRC-IN-10w REV: 08/2024

Prep-Rite RC is a viscous 15% EDTA gel that has been buffered to a neutral pH. It contains peroxide, which provides an effervescent action, and has a viscous consistency that is easily picked up on a file. During instrumentation and debridement of the root canal, Prep-Rite RC is an effective calcium binding material for decalcifying the canal walls, and it acts as a lubricant to minimize the binding and breaking of files. Prep-Rite is water-based and easily rinses out of the canal.

**PRODUCT DESCRIPTION**

15% EDTA viscous gel root canal lubricant and chelating agent with peroxide

**INDICATIONS**

To assist with instrumentation and debridement during endodontic treatment

**CONTRAINDICATIONS**

Not a permanent root canal filling material

**DIRECTIONS FOR USE**

1. Always place a rubber dam.
2. Remove cap from the syringe.
3. Dispense Prep-Rite RC onto a pad. Recap syringe immediately after use.
4. Dip the file into the Prep-Rite gel. Prep-Rite picks up on the file.
5. Instrument the canal and irrigate in the usual manner. Reapply Prep-Rite RC and repeat as necessary until the canal is enlarged and shaped as desired.
6. Rinse canal thoroughly.

**Note:** Apply disposable barrier sleeves/wraps over multiple-use dental dispensers before use with each patient. For additional information, refer to: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

**CAUTION**

Avoid contact with eyes.

**STORAGE AND HANDLING**

- Store tightly sealed in original container at cool room temperature. Avoid direct light, extremes of temperature, contamination and sources of ignition.
- Shelf life of unopened product: 2 years from date of manufacture.
- Re-cap immediately after use.

**REPORTING OF SERIOUS INCIDENTS**

Any serious incidents involving the device should be reported to the manufacturer and the Competent Authority of the Member State in which the incident occurred, or other appropriate regulatory body. Reports of serious incidents should be sent to:

Pulpdent Corporation  
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

email: [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)

**Note:** Refer to the Safety Data Sheet for a list of materials present in this product.

**ES****PULPDENT****PREP-RITE™ RC****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Gel viscoso de EDTA al 15%, lubricante del canal radicular y agente de quelación con peróxido.

**INDICACIONES**

Para ayudar con la instrumentación y el desbridamiento durante el tratamiento de endodoncia.

**CONTRAINDICACIONES**

No es un material de obturación permanente del conducto radicular.

**INSTRUCCIONES DE USO**

1. Coloque siempre un dique de hule.
2. Quite la tapa de la jeringa.
3. Dispense Prep-Rite RC en una loseta. Vuelva a tapar la jeringa inmediatamente después de usarla.
4. Sumerja la lima en el gel Prep-Rite. Prep-Rite se queda en la lima.
5. Instrumente el canal irrigando de manera habitual. Vuelva a aplicar Prep-Rite RC y repita según sea necesario hasta que el canal se haya ampliado y tenga la forma deseada.
6. Enjuague el canal a fondo.

**Nota:** Utilice fundas de barrera desechables sobre los dispensadores dentales de uso múltiple antes de usarlos con cada paciente. Para obtener información adicional, consulte: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

**PRECAUCIÓN**

Evite el contacto con los ojos.

**ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN**

- Almacene bien cerrado en el contenedor original a temperatura ambiente. Evite la luz directa, temperatura extrema, contaminación y fuentes de ignición.
- Vida útil del producto sin abrir: 2 años a partir de la fecha de fabricación.
- Volver a tapar inmediatamente después de su uso.

**REPORTE DE INCIDENTES GRAVES**

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del estado en el que ocurrió el incidente, u otro organismo regulador apropiado.

Los informes de incidentes graves deben enviarse a:

Corporación Pulpdent  
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 EE. UU.

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

correo electrónico: [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)

**Nota:** Consulte la hoja de datos de seguridad para obtener una lista de los materiales presentes en este producto.

**FR****PULPDENT****PREP-RITE™ RC****Description du Produit**

Gel visqueux à 15% d'acide éthylène diamine tétra-acétique, lubrifiant canalaire et agent chélateur avec peroxyde.

**Indications**

Pour aider à l'instrumentation et au débridement durant les traitements endodontiques.

**Contre-indications**

Ce n'est pas un matériau d'obturation permanent du canal radiculaire.

**Instructions d'Utilisation**

1. Placer toujours une digue en caoutchouc.
2. Retirer le capuchon de la seringue.
3. Verser Prep-Rite RC sur un pad. Reboucher la seringue immédiatement après utilisation.
4. mettre la lime dans le gel Prep-Rite. Prep-Rite puis reprendre la lime.
5. Limer le canal et irriguer de la manière habituelle. Réappliquer Prep-Rite RC et répéter si nécessaire jusqu'à ce que le canal soit agrandi et façonné comme vous le souhaitez.
6. Rincer abondamment le canal.

**Remarque :** Appliquer des protections jetables et remplacer l'embout avant de l'utiliser avec chaque patient. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

**Mise en garde**

Eviter le contact avec les yeux.

**Stockage et Manipulation**

- Conserver hermétiquement clos dans le contenant original à température ambiante fraîche. Eviter la lumière directe, les températures extrêmes, la contamination et les sources d'ignition.
- Validité du produit non ouvert : 2 ans à partir de la date de fabrication.
- Reboucher immédiatement après l'usage.

**Notification des incidents graves**

Tout incident grave impliquant le dispositif doit être notifié au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident s'est produit, ou à tout autre organisme de réglementation approprié.

Les rapports d'incidents graves doivent être envoyés à :

Société Pulpdent  
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 États-Unis

Tél. : 617-926-6666 / Fax : 617-926-6262

courriel : [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)

**Remarque :** Veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité pour une liste des matériaux présents dans ce produit.

**DE****PULPDENT****PREP-RITE™ RC****PRODUKTBESCHREIBUNG**

15 % EDTA, viskoses Gel, Wurzelkanalgleitmittel und Chelatbildner mit Peroxid

**INDIKATIONEN**

Zur Unterstützung der Instrumentierung und des Debridements während der endodontischen Behandlung.

**GEGENANZEIGEN**

Kein dauerhaftes Wurzelkanalfüllmaterial.

**GEBRAUCHSANWEISUNG**

1. Legen Sie immer einen Kofferdam an.
2. Entfernen Sie die Kappe von der Spritze.
3. Geben Sie die Feile in das Pad. Spritze sofort nach Gebrauch wieder verschließen.
4. Tauchen Sie die Feile in das Prep-Rite-Gel. Prep-Rite wird von der Feile aufgenommen.
5. Behandeln Sie den Kanal und spülen Sie ihn wie gewohnt. Prep-Rite RC erneut auftragen und bei Bedarf wiederholen, bis der Kanal wie gewünscht erweitert und geformt ist.
6. Kanal gründlich spülen.

**Bemerkung:** Verwenden Sie vor jedem Gebrauch Einweg-Schutzhüllen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

**WARNHINWEISE**

Kontakt mit Augen vermeiden.

**LAGERUNG UND HANDHABUNG**

- Gut verschlossen in der Originalverpackung lagern bei kühler Raumtemperatur.
- Direktes Licht und extreme Temperaturschwankungen vermeiden. Vor Kontamination und Brandgefahr schützen.
- Haltbarkeit bei ungeöffneter Packung: 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
- Nach Gebrauch sofort verschliessen.

**MELDUNG VON SCHWERWIEGENDEN ZWISCHENFÄLLEN**

Alle schwerwiegenden Zwischenfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Zwischenfall aufgetreten ist, oder einer anderen zuständigen Aufsichtsbehörde, gemeldet werden.

Richten Sie bitte Meldungen von schwerwiegenden Zwischenfällen an:

Pulpdent Corporation  
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

E-Mail: [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)

**Hinweis:** Eine Liste der in diesem Produkt enthaltenen Materialien finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

IT

PULPDENT

PREP-RITE™ RC

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

15% EDTA gel viscoso lubrificante canalare e agente chelante con perossido.

INDICAZIONI

Per agevolare le fasi di strumentazione e rimozione dei detriti durante il trattamento endodontico.

CONTROINDICAZIONI

Non è un materiale per otturazione canalare permanente.

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1. Posizionare sempre una diga di gomma.
- 2. Rimuovere il tappo dalla siringa.
- 3. Dispensare Prep-Rite RC su un pad. Richiudere la siringa subito dopo l'uso.
- 4. Immergere la lima nel gel Prep-Rite RC rivestendola completamente.
- 5. Strumentare il canale e irrigare come di consueto. Riapplicare Prep-Rite RC e ripetere se necessario fino a quando il canale non risulti allargato e modellato come desiderato.
- 6. Sciacquare accuratamente il canale.

**Nota** : Applicare delle protezioni monouso sulla siringa e cambiare il puntale dopo ogni paziente.

Per ulteriori informazioni vedere: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

ATTENZIONE

Evitare il contatto con gli occhi.

CONSERVAZIONE E GESTIONE

- Conservare nel contenitore originale ben sigillato a temperatura ambiente fresca. Evitare la luce diretta, temperature estreme, contaminazione e fonti di ignizione.
- Periodo di validità del prodotto non aperto: 2 anni dalla data di produzione.
- Richiudere immediatamente dopo l'uso.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTI GRAVI

Qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente, o altro organismo di regolamentazione appropriato. Le segnalazioni di incidenti gravi devono essere inviate a:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

e-mail: [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)

**Nota:** Consultare la scheda di sicurezza per un elenco dei materiali presenti in questo prodotto.

NL

PULPDENT

PREP-RITE™ RC

PRODUCTBESCHRIJVING

15% EDTA viskeuze gel wortelkanaalsmeermiddel en chelaatvormer met peroxide

INDICATIES

Ter ondersteuning van instrumentatie en debridement tijdens endodontische behandelingen

CONTRA -INDICATIES

Geen permanent wortelkanaal vulmateriaal

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1. Plaats altijd een rubberdam.
- 2. Verwijder de dop van de spuit.
- 3. Doseer Prep-Rite RC op een pad. Sluit de spuit onmiddellijk na gebruik weer af.
- 4. Doop de vijl in de Prep-Rite-gel. Prep-Rite pakt het dossier op.
- 5. Instrumenteer het kanaal en irigeer op de gebruikelijke manier. Breng Prep-Rite RC opnieuw aan en herhaal indien nodig totdat het kanaal vergroot en gevormd is zoals gewenst.
- 6. Spoel het kanaal grondig uit.

**Opmerking:** Breng vóór gebruik bij elke patiënt wegwerpbare barrièrehoezen/-wikkels aan over tandheelkundige dispensers voor meervoudig gebruik. Raadpleeg voor meer informatie: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

LET OP

Vermijd contact met de ogen.

OPSLAG EN HANTERING

- Bewaar goed afgesloten in de originele verpakking op een koele kamertemperatuur. Vermijd direct licht, extreme temperaturen, vervuiling en ontstekingsbronnen.
- Houdbaarheid van ongeopend product: 2 jaar vanaf fabricagedatum.
- Sluit de dop direct na gebruik weer af.

MELDING VAN ERNSTIGE INCIDENTEN

Alle ernstige incidenten waarbij het hulpmiddel betrokken is, moeten worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waar het incident heeft plaatsgevonden, of aan een andere bevoegde regelgevende instantie. Meldingen van ernstige incidenten dienen te worden gestuurd naar:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

**Opmerking:** Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor een lijst van materialen in dit product.

PL

PULPDENT

PREP-RITE™ RC

OPIS PRODUKTU

15% lepki żel EDTA nawilżający kanał korzeniowy oraz środek chelatujący z nadtlenkiem

WSKAZANIA

Pomoc w opracowaniu kanałów korzeniowych podczas leczenia endodontycznego

PRZECIWWSKAZANIA

Nie jest to trwały preparat do wypełniania kanałów korzeniowych

INSTRUKCJA UŻYCIA

- 1. Zawsze zakładaj koferdam.
- 2. Zdjąć nasadkę ze strzykawki.
- 3. Nałożyć Prep-Rite RC na podkładkę. Zakręcić strzykawkę natychmiast po użyciu.
- 4. Zanurzyć pilnik w żelu Prep-Rite. Nabierz Prep-Rite na narzędzie kanałowe
- 5. Opracuj kanał i przeplucz w zwykły sposób. Ponownie nałożyć Prep-Rite RC i powtarzaj w razie potrzeby, aż kanał zostanie powiększony i ukształtowany zgodnie z potrzebami.
- 6. Dokładnie wypłucz kanał.

**Uwaga:** Przed użyciem u każdego pacjenta na dozowniki stomatologiczne wielokrotnego użytku należy nałożyć jednorazowe rękawy ochronne. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie:

<https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

OSTRZEŻENIE

Unikaj kontaktu z oczami.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj w szczelnie zamkniętym, oryginalnym pojemniku, w chłodnej temperaturze pokojowej. Unikaj bezpośredniego naświetlenia, ekstremalnych temperatur, skażenia materiału i źródeł zapyłonu.
- Data przydatności do użycia nieotwartego produktu: 2 lata od daty produkcji.
- Zakręcaj natychmiast po użyciu.

ZGŁASZANIE POWAŻNYCH INCYDENTÓW

Wszelkie poważne incydenty związane z wyrobem należy zgłaszać producentowi i kompetentnemu organowi odpowiedzialnemu, w regionie, w którym miał miejsce incydent. Raporty o poważnych ząjsiach wysyłaj do:


Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

email: [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)

**Uwaga:** Lista materiałów obecnych w tym wyrobie dostępna w Karcie Charakterystyki Wyrobu.

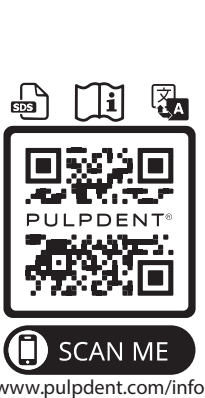

	Electronic Safety Data Sheet
EN	Electronic Safety Data Sheet
ES	Ficha electrónica de datos de seguridad
FR	Fiche de données de sécurité électronique
DE	Elektronisches Sicherheitsdatenblatt
IT	Scheda di sicurezza elettronica
DK	Elektronisk sikkerhedsdatablad
NL	Elektronisch veiligheidsinformatieblad
SE	Elektroniskt säkerhetsdatablad
NO	Datablad om elektronisk sikkerhet
FI	Sähköinen käyttöturvallisuustiedote
CZ	Elektronický bezpečnostní list
LV	Elektroniskā drošības datu lapa
LT	Elektroninis saugos duomenų lapas
PT	Ficha de dados de segurança eletrónica
SK	Elektronická karta bezpečnostných údajov
PL	Elektroniczna karta charakterystyki
RO	Fișa electronică cu date de securitate
EE	Elektroonline ohutuskaart
BG	Електронен информационен лист за безопасност
GR	Ηλεκτρονικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας



Leibetseder Dentalwarenhandel GmbH

Hans-Zach-Straße 2  
4210 Gallneukirchen  
Austria

Bohumila Siegllová

Kolmá 303  
25203 Řitka  
Czech Republic

Hu-Fa Dental a.s.

Moravni 909  
765 02 Otrokovice  
Czech Republic

Cenger Scandinavia A/S

Urlevvej 6 B  
8783 Hornslyd  
Denmark

Dansk Nordenta A/S

Nydamsvej 8  
8362 Hørning  
Denmark

Plandent OY

Asentajankatu 6 B  
00880 Helsinki  
Finland

OPSYSE

18 Allée du Fenouil  
ZA Saint Louis  
84250 Le Thor  
France

KinderDent GmbH

Gutenbergstraße 7  
28844 Weyhe  
Germany

Ortho Organizers GmbH

Lauenburgstraße 59  
88161 Lindenberg im Allgäu  
Germany

Dental Medical Ireland

Kellystown House  
Kellystown Lane, Leixlip  
Co. Kildare, W23 VF9P  
Ireland

Ravelli S.p.A.

Via Darwin 32-34  
20019 Settimo Milanese  
Italy

Virdental, UAB

Artojų g. 52B, Garliavos Apylinkių seniūnija  
Teleičių kaimas  
53273, Kauno Rajonas  
Lithuania

Hofmeester Dental B.V.

Andries Copierhof 2  
3059 LM Rotterdam  
Netherlands

Equadent Sp z o.o.

ul. Pck 12  
62-500 Konin  
Poland

Lifco Dental AB

Verkmästaregatan 1  
745 39 Enköping  
Sweden

UNIDENT AB

Västerhavsvägen 2  
311 77 Falkenberg  
Sweden



PULPDENT® Corporation

80 Oakland Street • Watertown, MA 02472 • U.S.A.

(617) 926-6666 or (800) 343-4342 • Fax (617) 926-6262

[www.pulpdent.com](http://www.pulpdent.com) • [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)

XP-PRC-IN-10

REV: 08/2024